

Rotatory Kids





Formación
&
Experiencia



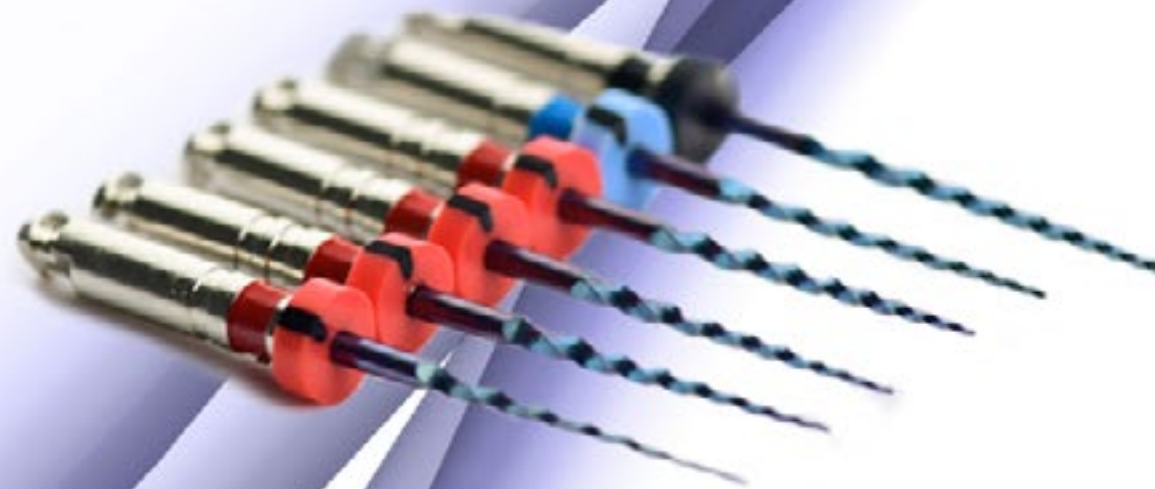

Iván Varela
Endogal Expert


“Endogal Rotatory Kids no es el futuro, si no que es el presente...”

No hay mejor sistema para realizar pulpectomías hoy en día que Endogal Kids, tanto en Europa como fuera de ella, ya que todas sus características nos facilitarán los tratamientos realizándolos de una forma rápida e intuitiva, con una calidad excelente y con un resultado óptimo.


*Desde aquí os animo a probarlas para que comprobéis en vuestras propias manos que a la hora de realizar pulpectomías el sistema Endogal Kids **no es el futuro, si no que es el presente.***

INSTRUMENTOS

-  Kit para la instrumentación de **dientes decíduos**.
-  **Contenido:** 1 x 25/04 (17 mm.), 3 x 25/06 (17 mm.), 1 x 30/04 (17 mm.), 1 x 40/04 (19 mm.).
-  Aleación de níquel - titanio con tratamiento térmico.
-  La permeabilización previa se recomienda hacerla con la lima Pre K.

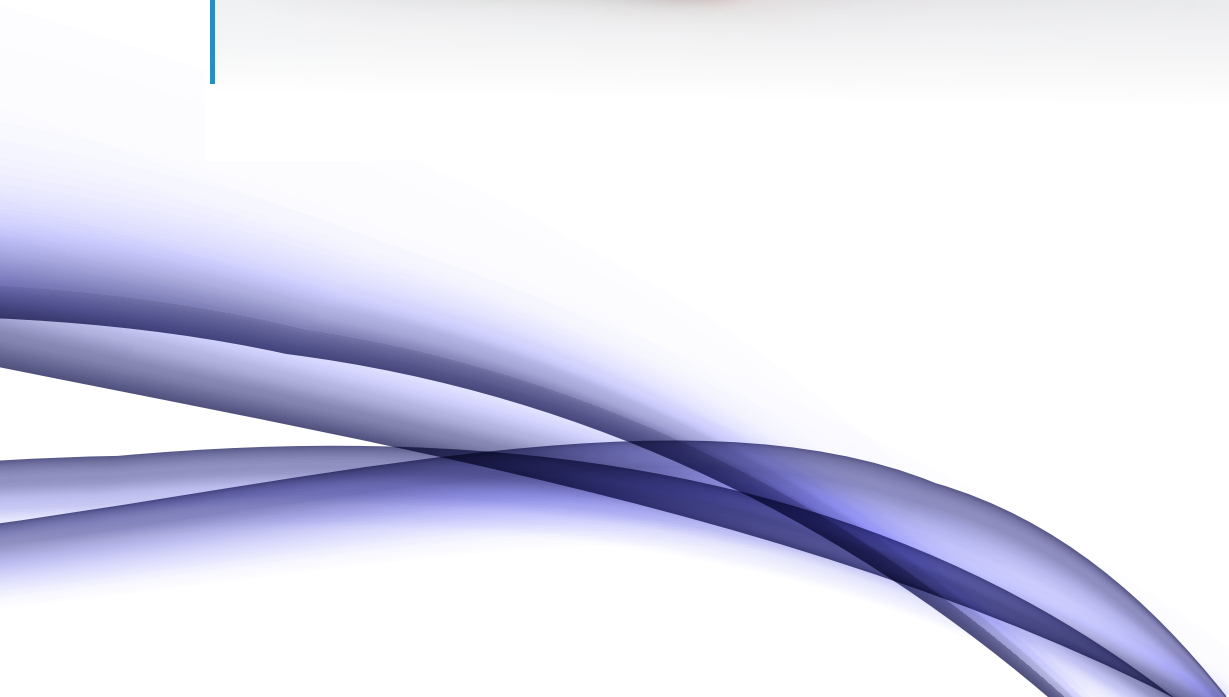


INSTRUMENTOS EK1

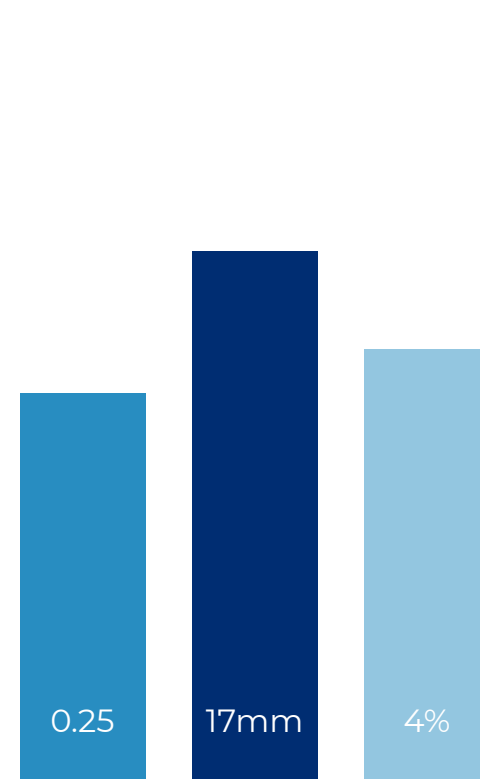



Diámetro. ●
0.25

Longitud. ●
17 mm


Conicidad. ●
4%

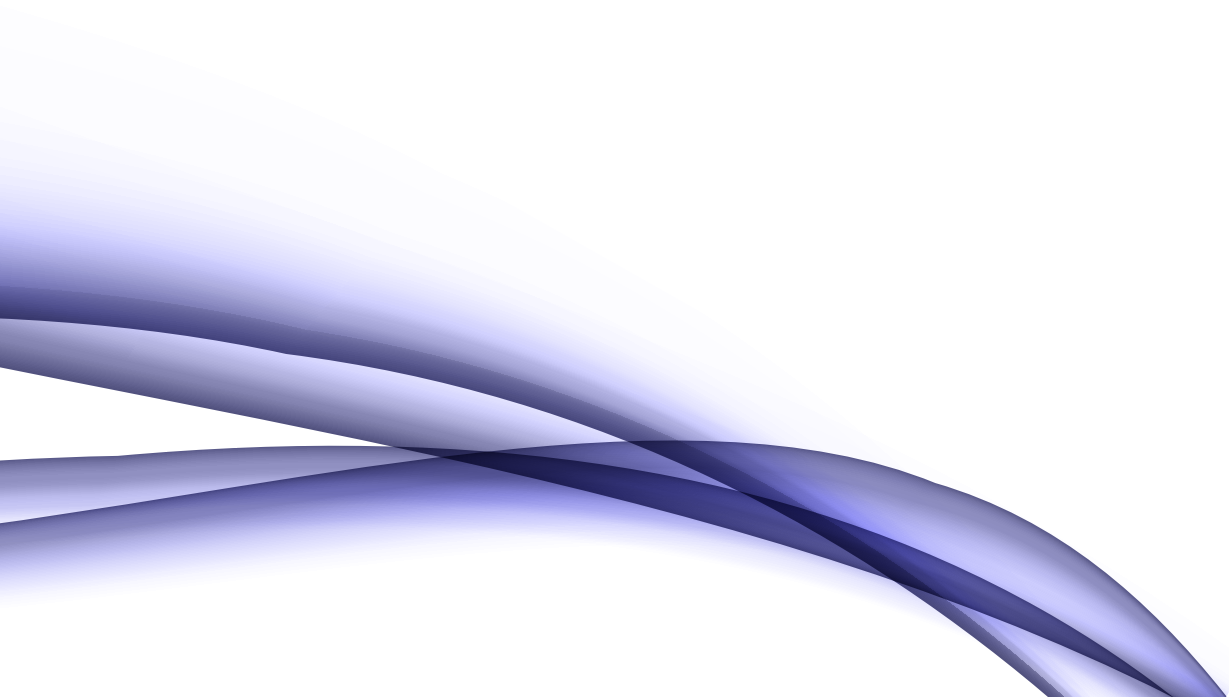

INSTRUMENTOS EK2

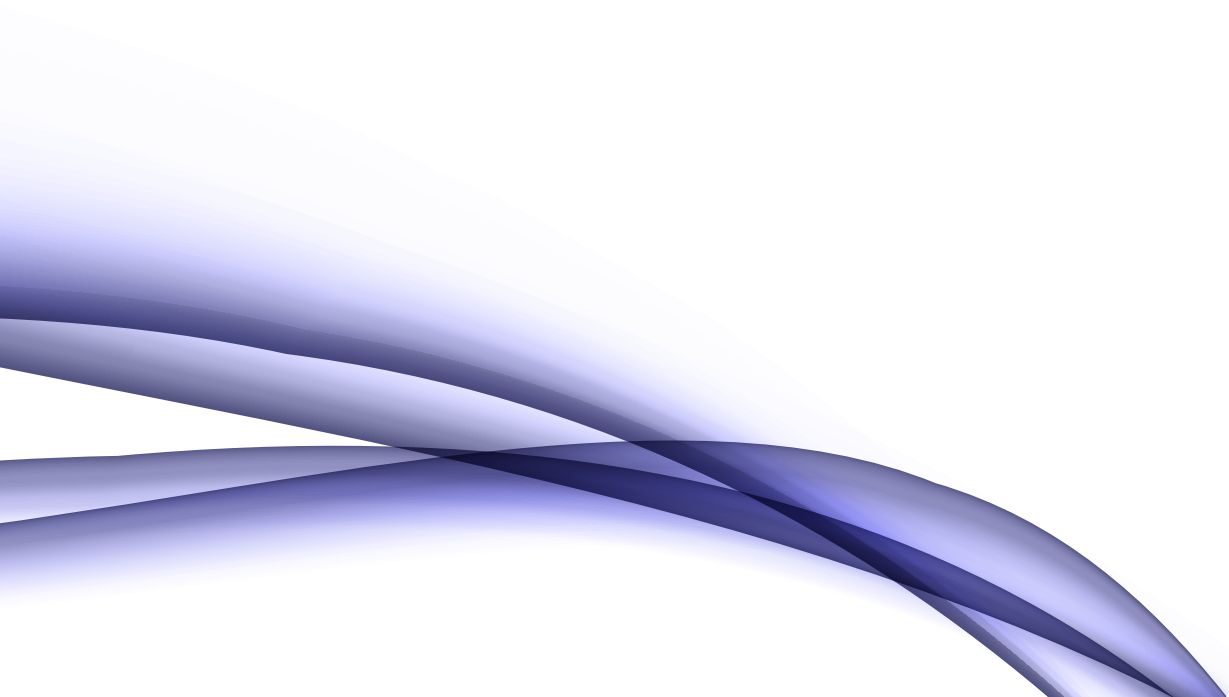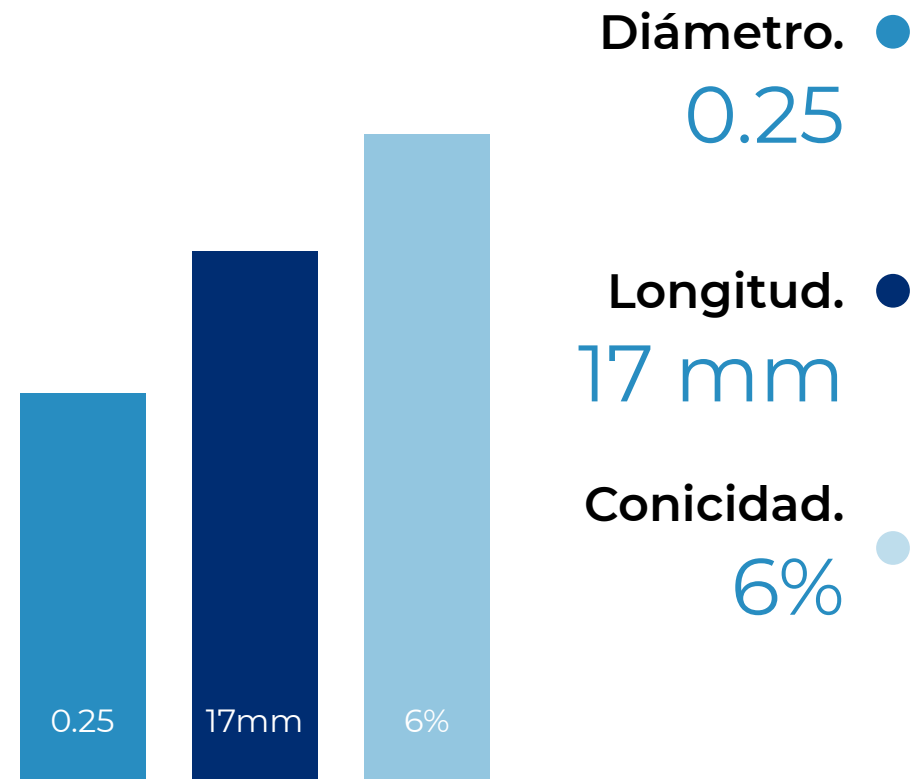


INSTRUMENTOS EK3

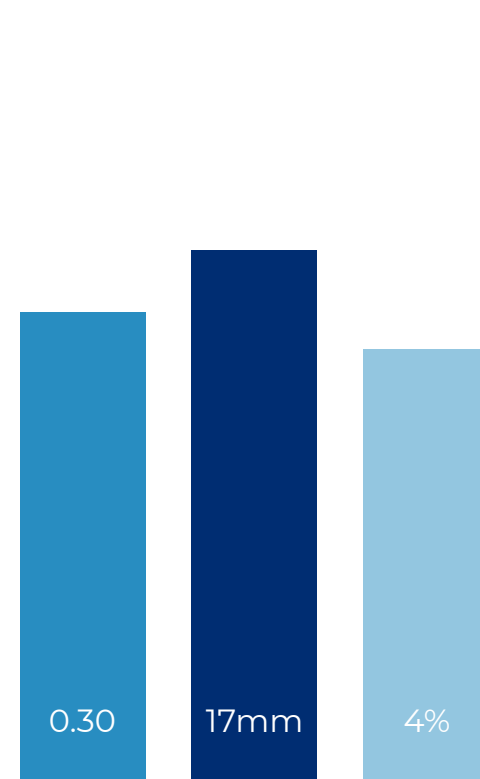



Diámetro. ●
0.30

Longitud. ●
17 mm

Conicidad. ●
4%

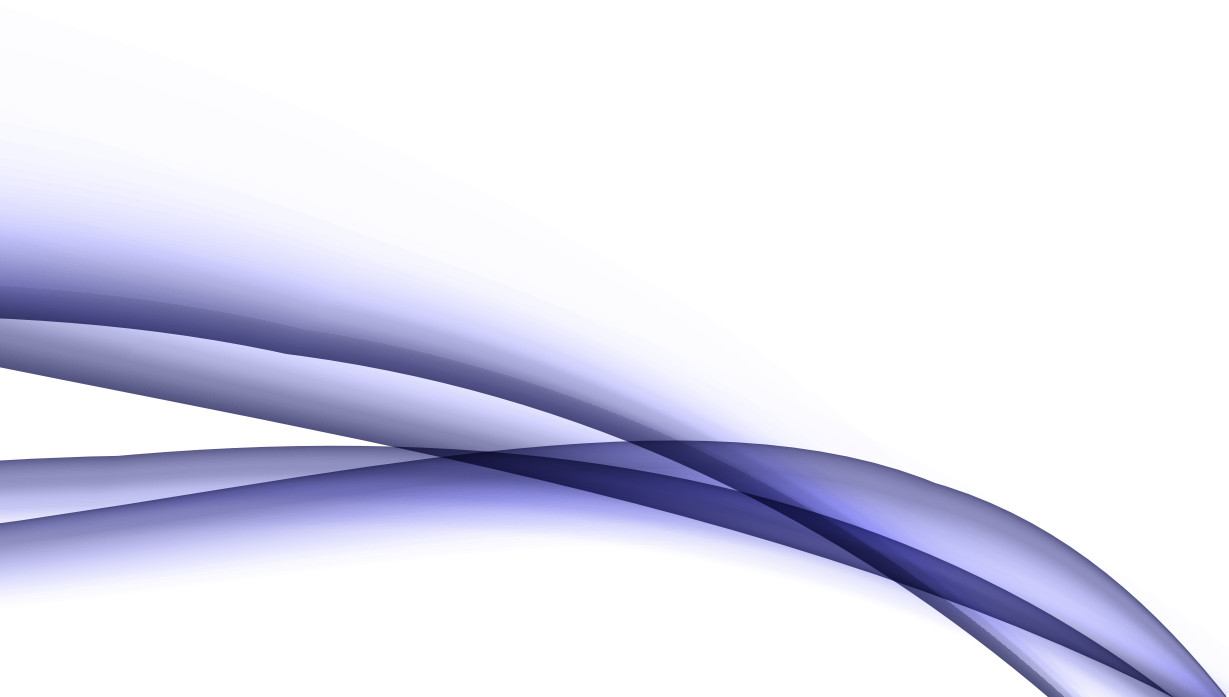

INSTRUMENTOS EK4

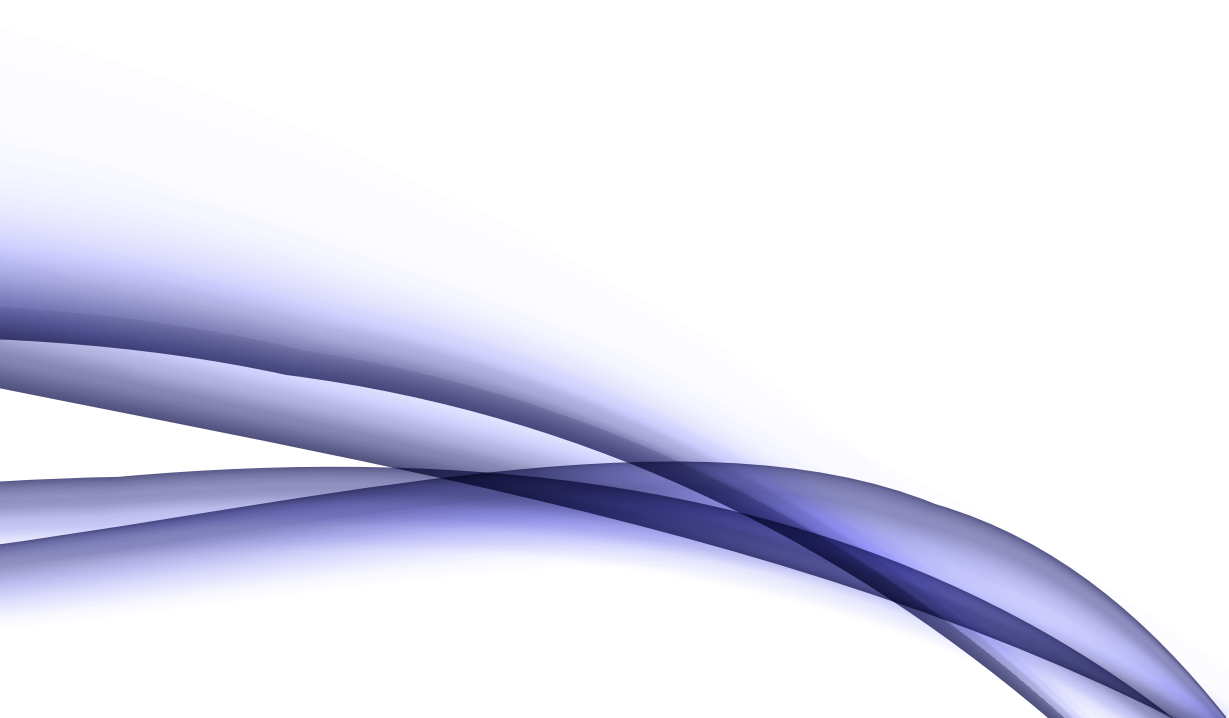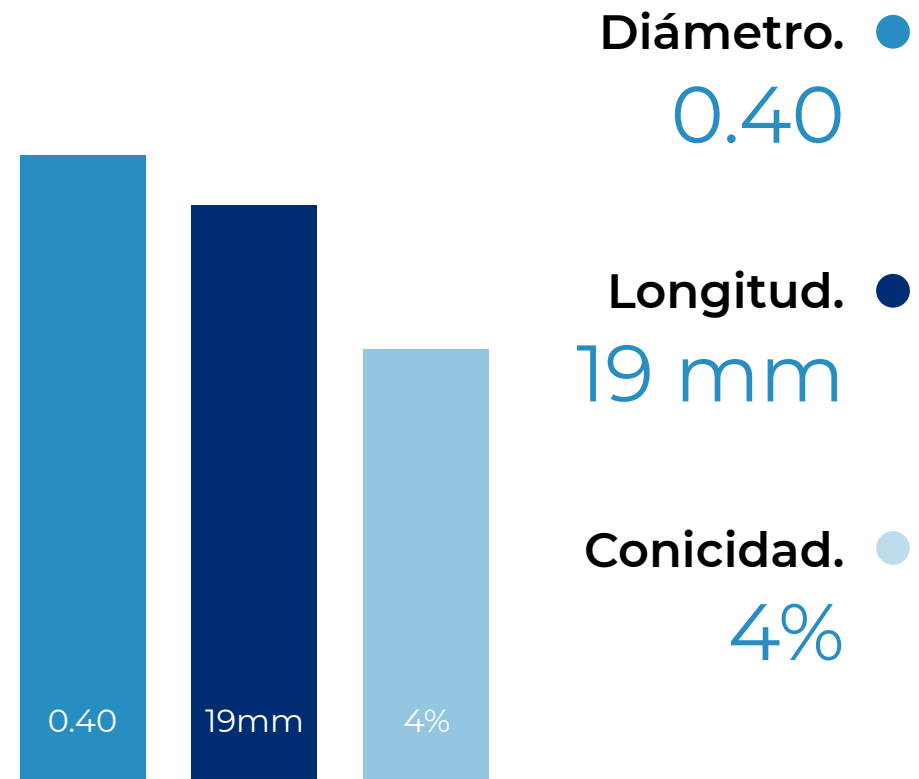

SISTEMA DE MOVIMIENTO CONTINUO PARA DIENTES DECÍDUOS



Movimiento continuo a **350 RPM** / Torque **4 Ncm**

Ajuste de Lima K a longitud de trabajo	Instrumentación			
	EK1 25.04	EK2 25.06	EK3 30.04	EK4 40.04
Lima K 0.15	Instrumento único (<i>conductos estrechos</i>)			
Lima K 0.20	Instrumento de inicio	Instrumento final (<i>conductos medios</i>)		
Lima K 0.25		Instrumento de inicio	Instrumento final (<i>conductos anchos</i>)	
Lima K 0.30				Instrumento único (<i>dientes anteriores</i>)

SISTEMA DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE PARA DIENTES DECÍDUOS



Movimiento alterno a **150°/30°** o **210°/90°** a **350 RPM** / Torque **2-4 Ncm**

Ajuste de Lima K a longitud de trabajo	Instrumento único
Lima K 15	EK1 (Conductos estrechos)
Lima K 20	EK2 (Conductos medios)
Lima K 25	EK3 (Conductos anchos)
Lima K 30	EK4 (Dientes anteriores)



 endogal®

